

Meiner_{PRO}

MÁQUINA FACIAL

PLUS VISSAGÉ

- Terapia galvánica de iones
- Terapia ultrasónica
- Micro vibración



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Máquina para Cuidados de Belleza

Manual de Instrucciones

Felicitaciones por su compra

* Gracias por escoger la máquina de cuidados de belleza I-PH-S

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarla y guárdelo para consultas futuras.
- Este producto ha sido diseñado para embellecer la piel, no lo utilice ni lo venda para fines médicos.

Para una parte de construcción clase III alimentada por una fuente desmontable, las instrucciones deben indicar que el aparato sólo se debe utilizar con la fuente provista

Especificaciones

Artículo No.: PLUS VISSAGÉ

Nombre: Máquina Iónica Ultrasónica Fotónica recargable para el cuidado de la piel

Adaptador potencia de entrada de energía: AC100-240V

Adaptador de salida de energía: 5V, 1.0A

Dimensión: 17.8 x 4.8 x 4.5cm Peso: 175g

Frecuencia de Ultrasonido 3MHz±5

Presentación

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y se relaciona con nuestra salud e imagen. Cada vez son más las personas, especialmente las mujeres, que se preocupan del cuidado de la piel. Sin embargo, la gravedad, la luz solar, la radiación, etc. son perjudiciales para la piel, causando debilitamiento, flacidez, arrugas, manchas, acné y otros problemas asociados a ella. Para proteger y embellecer la piel, no sólo necesitamos cosméticos para cuidarla, sino también, un equipo de belleza profesional que nos ayude a obtener mejores resultados.

El equipo personal para cuidados de belleza 1-PH-S combina cuatro tecnologías conocidas y efectivas: iones (corriente galvánica), fotones (luces rojas, azules y verdes), ultrasonido y masajes vibratorios. El equipo se utiliza junto con productos cosméticos para el cuidado de la piel, es práctico para usar en casa y fácil de transportar. Ofrece las siguientes ventajas:

- Limpia la piel profundamente
- Elimina las arrugas y suaviza la piel
- Blanquea y tonifica la piel
- Reduce las grasas, moldea el contorno de la cara
- Reduce manchas, ojeras, bolsas en los ojos
- Estimula la circulación sanguínea y el metabolismo

Información Importante

1. Este equipo debe ser utilizado en condiciones normales. Recuerde desconectarlo y desenchufar el cable eléctrico al terminar de usarlo. Esto evitará que el equipo se sobrecaliente consecuencia de las vibraciones de aire y también evitará que se reduzca su vida útil.
2. Es normal que al aplicar ultrasonido la sonda masajeadora se caliente levemente y se sientan algunos pinchazos. Aplicar una crema de tratamiento puede aliviar la incomodidad causada por el calor. Se recomienda el uso de geles.
3. Evite utilizar el equipo sobre una misma zona durante mucho tiempo. Muévelo en círculos sobre la piel para evitar los efectos causados por la energía de las ondas.
4. Para lograr que el tratamiento sea más eficiente, al usar el equipo, acerque completamente la sonda masajeadora sobre la piel.

5. Limpie la sonda después de usarla. Se recomienda utilizar un paño suave y húmedo para evitar dañarla. No utilice productos químicos para limpiar el equipo, ya que podría afectar su funcionamiento o acortar su vida útil.

Prueba Simple de Alergia:

1. Limpie la muñeca.
2. Aplique el mismo producto que piensa utilizar sobre el sector de la piel que recién se ha limpiado, deje que se seque naturalmente (durante la prueba, no toque el agua ni retire el producto). Si experimenta alergias o anomalías en la piel, interrumpa la prueba de inmediato y comuníquese lo antes posible con su médico o acuda al hospital más cercano.
3. Después de 48 horas, si no se observan signos de alergias o situaciones inusuales, use el equipo y disfrute del tratamiento de cuidado de belleza en su misma casa.

Precauciones de Seguridad

Nota: lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el equipo. Esto le ayudará a garantizar la validez de la garantía y extender la vida útil del equipo.

1. Guarde el equipo en un lugar protegido de la humedad y no lo utilice bajo el agua, de lo contrario los componentes electrónicos podrían corroerse y provocar un cortocircuito.
2. No intente desarmar el equipo usted mismo. Las piezas sólo pueden ser reparadas o atendidas por un centro de servicio técnico profesional.
3. Sólo utilice el tipo de corriente indicado. El uso de un tipo de corriente no compatible con el equipo puede causar problemas de funcionamiento o puede ser peligroso.
4. Las personas con las siguientes condiciones deben evitar usar este producto: pacientes con enfermedades malignas; mujeres embarazadas; pacientes con dermatitis por hemorragia; pacientes graves con enfermedades no identificadas.
5. Mantenga el equipo lejos del alcance de los niños.
6. Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo supervisión.
7. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

Principales Funciones

Ultrasonido: la terapia ultrasónica (3 millones de veces por minuto) es adecuada para el cuidado dermatológico en terapias faciales, oculares y corporales. Las ondas ultrasónicas de alta frecuencia generan calor, estimulación física y cambios de movimiento adecuados para las células; **estimulan y adaptan la membrana celular, mejoran la función de la epidermis y el calor acelera el metabolismo y la regeneración del tejido epidérmico. Asimismo, ayuda a que los iones (- / +) funcionen mejor para cualquier tipo de piel.**

Masaje físico: la vibración física (6,000-7000 veces por minuto) puede acelerar la circulación sanguínea, **diluir la melanina, el exceso de humedad y eliminar los edemas. Al trabajar con la función ultrasónica, es posible blanquear y estirar la piel.**

Ion+ (externo): al utilizar el ion positivo, se formará un circuito eléctrico entre la palma y el sector de la piel que está siendo tratada. En base a que las cargas opuestas se atraen, la aplicación de ion+ permite eliminar la suciedad profunda de la piel.


Ion- (interno): al utilizar el ion negativo, se formará un circuito eléctrico entre la palma y el sector de la piel que está siendo tratada. En base a que las cargas similares se repelen, la aplicación del ion- permite introducir y absorber mejor los nutrientes contenidos en las cremas de tratamiento para la piel.

Funciones

Indicadores:

- LED rojo: 620-630nm
- LED azul: 460-470nm
- LED amarillo: 580-590nm

Alta energía, concentración

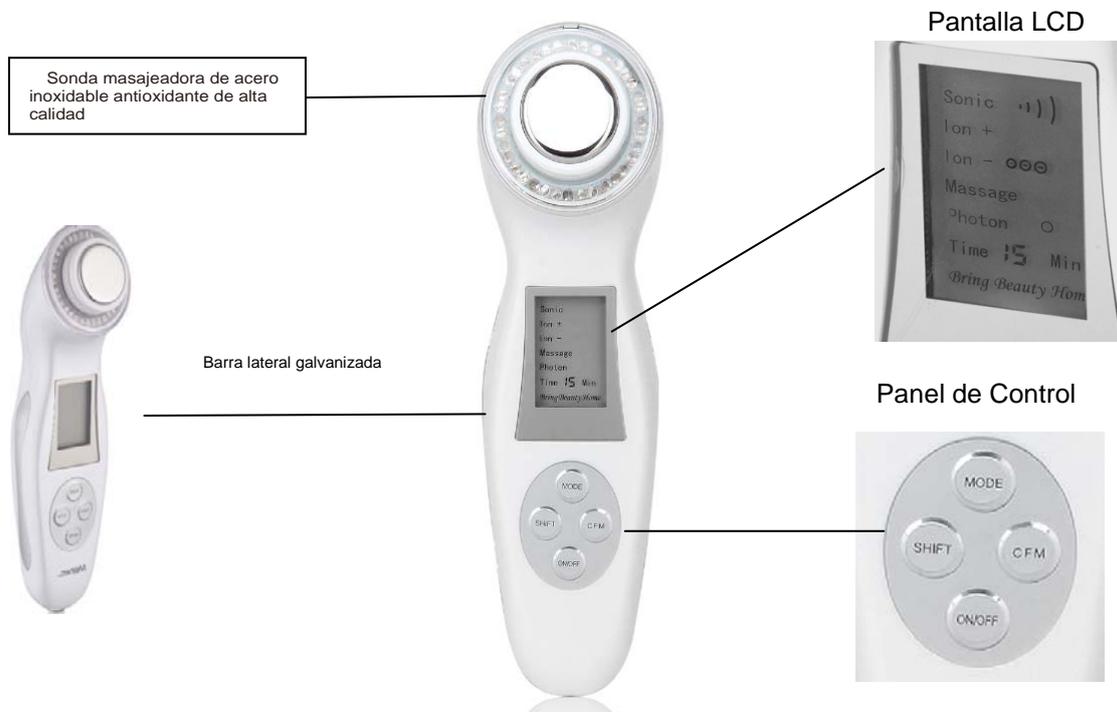

Funciones de los indicadores:

1. Ledrojo:620-630nm

Alcanza la dermis y estimula las fibras celulares, mejora la circulación sanguínea, activa la piel, reduce las arrugas y suaviza la piel.

Adecuado para todo tipo de piel.

2. Led azul:460-470nm

Elimina las bacterias, alivia y combate las erupciones cutáneas y el acné, fortalece las fibras proteicas, reduce los poros.

Adecuado para tipos de piel grasa.

3. Led amarillo: 580-590nm

Puede promover la generación de oxígeno alternando la microcirculación, diluye los pigmentos y blanquea.

Adecuado para todo tipo de piel.

Operación

- Conecte el adaptador al equipo y enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente; se escuchará un "bip" y el equipo estará listo para operar.
- Al cargar la batería del equipo, la pantalla LCD se iluminará de color azul; cuando la batería esté completamente cargada, la luz se apagará. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas y 2,5 horas de uso continuado.
- Aplique gel u otro producto sobre la cara o la sonda masajeadora; encienda el equipo.
- Coloque la sonda masajeadora directamente sobre la piel y comience a moverla según se indica en las imágenes.
- Si siente que la sonda está muy seca para aplicarla fácilmente, agregue más gel o el producto de tratamiento usado (Dosis: 4-5 g por vez)

Forma básica para masajear:
 Levante de abajo hacia arriba
 De izquierda a derecha en forma simétrica
 Movimientos lentos



1. Encienda el equipo: la pantalla LCD se enciende y se escucha un 'bip'.
2. Función simple:
Presione "MODE"(Modo) para seleccionar la función, por ejemplo, "Sonic" –el indicador para esta función comienza a parpadear - presione "SHIFT" para ajustar la potencia - Presione "CFM" para comenzar a operar.
3. Funciones Combinadas (2 tipos de funciones):
Después de utilizar un tipo de función: presione "MODE" para seleccionar otra función, por ejemplo, "Ion-" –El indicador para la función 'Ion-' comienza a parpadear - Presione "SHIFT" para ajustar la potencia - Presione "CFM" para comenzar a operar.
4. Funciones Combinadas (3 tipos de funciones):
Después de utilizar dos tipos de funciones - Presione "MODE" para seleccionar otra función, por ejemplo, "Massage" –El indicador de la función "Massage" comienza a parpadear - Presione "SHIFT" y "CFM" para comenzar a operar.
5. Funciones Combinadas(4tipos de funciones):
Después de utilizar tres tipos de funciones - Presione "MODE" para seleccionar otra función, por ejemplo, "Photon" –el indicador de función "Photon" comienza a parpadear - "Presione" SHIFT "para seleccionarLEDS - Presione" CFM "para comenzar a operar.
6. Tiempo
La configuración predeterminada cuando la función automática de tiempo está desactivada es de 15 minutos. Presione "MODE" para seleccionar la opción "Time" (Tiempo). La opción "Time" comienza a parpadear - Presione "SHIFT" para programar el tiempo de 1 a 19 minutos - Presione "CFM" para comenzar a operar.

Nota: La función 'Ion+' e 'Ion-' no pueden operar al mismo tiempo.

Recomendaciones: Prueba de Ultrasonido

Paso 1: deje caer unas gotas de agua sobre la punta de la sonda masajeadora.

Paso 2: encienda el equipo; seleccione el modo "Sonic" y luego presione "CFM" para comenzar a operar.

Paso 3: Lassalpicaduras de agua indican que la función de ultrasonido está funcionando correctamente. Vuelva a encender el equipo para continuar usándolo después de que se ha apagado automáticamente

uía de Uso

Cuidado diario

(No utilice el equipo más de 3 veces por semana ni por más de 30 minutos por aplicación)

Paso 1: Limpiezaprofunda

1. Elimine completamente el maquillaje y las impurezas.
2. Aplique un producto adecuado de limpieza de piel.
3. Seleccione la función ultrasónica ion+ - intensidadmoderada.

4. Mueva la sonda masajeadora lentamente en la dirección indicada desde la mandíbula hacia la parte inferior de la oreja. También la puede pasar por otros sectores de la cara de acuerdo con lo indicado en las imágenes.
5. Lave la cara con agua.

Paso 2: Tratamiento con un producto nutritivo y modelamiento del contorno de cara

1. Aplique el gel o el producto adecuado sobre la sonda masajeadora.
2. Seleccione la función ultrasónica ión+ con la intensidad adecuada.
Mueva la sonda masajeadora lentamente en la dirección indicada desde la mandíbula hacia la parte inferior de la oreja. También la puede pasar por otros sectores de la cara de acuerdo con lo indicado en las imágenes.

Paso 3: Tratamiento de Fotones

1. Seleccione uno de los indicadores (rojo / azul / amarillo)
2. Dirija la luz sobre la zona de la piel que desee tratar. Mueva la sonda masajeadora cada 5 segundos.

* Para reducir el tiempo de tratamiento, puede aplicar el paso 2 y 3 al mismo tiempo.



Dilución de manchas y blanqueamiento (una vez cada dos días)

Paso 1: Limpie la piel profundamente
(consulte el Paso 1 – Cuidado Diario)



Paso 2: Aplique un producto de blanqueamiento

1. Encienda la máquina y seleccione la función 'ion-' con la intensidad adecuada.
2. Aplique el producto de blanqueamiento (como VC) sobre las manchas o sobre la piel que necesite blanquear y luego pase el equipo sobre la zona que desea tratar. Deje que la sonda masajeadora permanezca unos 20-30 segundos en la misma posición y luego cambie a otra zona que desee tratar.



<p>Tratamiento para el acné (Una vez por noche) Paso 1: Limpie la piel profundamente (consulte el Paso 1 – Cuidado diario)</p>	 <p>Limpie la piel</p>
<p>Paso 2: Drenaje Linfático</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda el equipo y seleccione la función 'Sonic' con la intensidad adecuada. Aplique el drenaje linfático de acuerdo con la dirección indicada. 2. Masajee la zona con acné 3. Utilice la luz azul para iluminar la zona con acné unos 15-20 minutos 4. Utilice la luz roja para tratar la zona unos 10 minutos más. 	 <p>Drenaje linfático</p>
<p>Piel sensible (una vez cada 2 días)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie la piel profundamente (consulte el Paso 1 - Cuidado Diario) 2. Encienda el equipo y seleccione la función 'Sonic' con la intensidad adecuada. 3. Aplique la luz verde para iluminar la piel en la zona que necesita tratamiento – aprox. 15-20 minutos. 	 <p>Inflamación por acné</p>
<p>Si desea lograr mejores resultados y estimular la circulación sanguínea al aplicar este tratamiento, utilice la función "Massage".</p>	

Recomendaciones:

- Toque la barra lateral al utilizar las funciones 'ion+' e 'ion-'
- Es normal sentir unos pinchazos leves al usar la función de iones



Meiner

Gracias por escoger este producto:

. Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:

. Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre. Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

. La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

. Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
. Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
. Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
. El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
. Instalación defectuosa.
. Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía.

Observaciones:

. Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
. Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
. La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
. La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Ante cualquier reclamo o desperfecto del producto, diríjase con el comprobante de compra a la tienda donde fue adquirido, nuestro servicio de post venta le asistirá gratuitamente

ARGENTINA

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto Falabella: Bogotá fono. 58 78 002
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 113 252
Visítemos: www.falabella.com.co

PERU

Teléfono de Contacto Falabella: (51) (01)-512-3333
Visítenos: <http://www.falabella.com.pe>